

NEST



5L 高效摇瓶带管路

5L Efficient Erlenmeyer Flask (with tube)


为满足客户需求, NEST今年隆重推出了带管路的5L高效摇瓶, 省去顾客管路设计、组装、灭菌等操作, 提高了生产效率。

产品介绍

高效大容量培养瓶, 在哺乳动物细胞及昆虫细胞培养中, 细胞表现活力强且蛋白表达量大。在培养过程中, 摇床的使用率明显提高, 细胞成活率和活性都有显著上升。NEST 高效摇瓶, 还具有高重复性, 不同批次间细胞生长及产量具有较高的一致性。

产品特点

- 预装在高效摇瓶上, 实现了液体的密闭式转移, 减少了装盖、拧盖过程中的外来污染风险
- 转移盖自带大滤膜, 高氧通量, 无需外接空气过滤器, 保证细胞的高密度培养的同时, 整体高度降低, 摇床适用范围更广, 提高摇床的使用率。

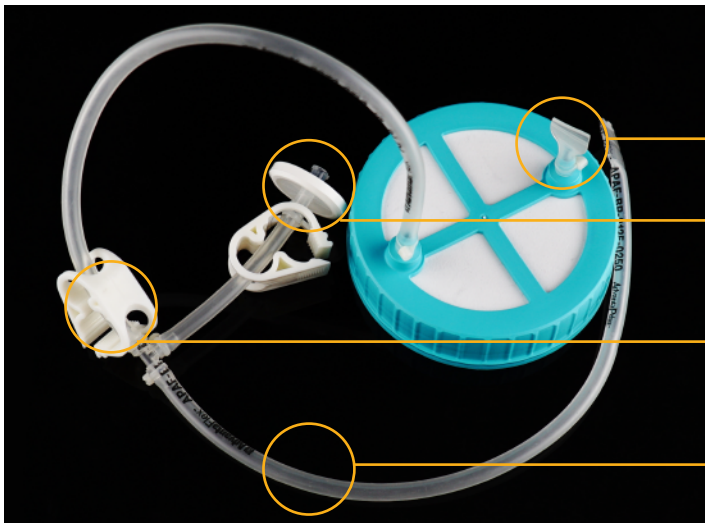


预留端口:端口密封, 预留灵活的定制功能。

针式滤器:TPE管路带0.22umPTFE针式滤器, 解决补料过程中管路液体残留的情况。


软管夹 X 2

TPE热塑性管:用于液体转移, 可在常规环境下通过专业仪器进行无菌焊接。

5L高效摇瓶带管路

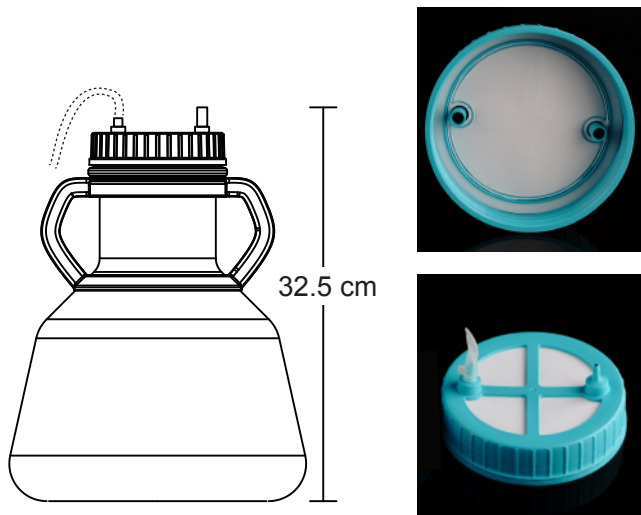

5L高效摇瓶旧款

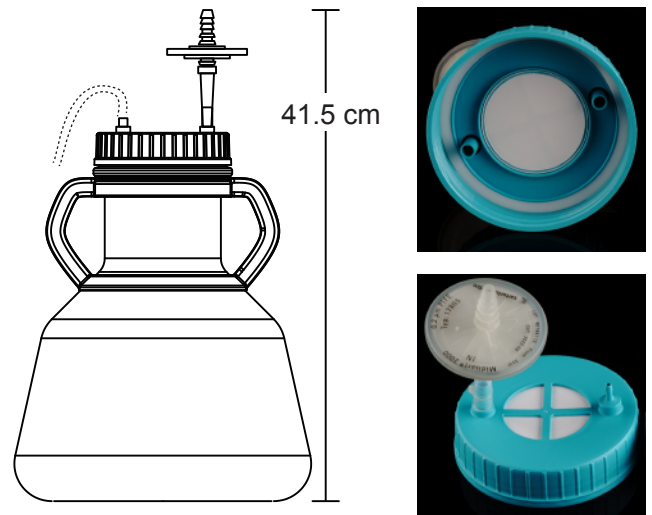

产品编号	产品名称	管路信息	管路长度	个/箱
787081	5L高效摇瓶(带管路)	TPE热塑管, 管径:1/8" ID, 1/4" OD	30CM+30CM	4