




Cat.No.752101

锁扣细菌皿


采用高透度医用级聚苯乙烯材质，
可用于真菌、细菌和其他微生物培养

NEST 锁扣细菌培养皿，皿体顶部圆周设置多个凸起，培养皿盖内侧圆周设置多个与凸起对应的卡扣；每个卡扣的下端设置斜坡面、上端设置允许凸起滑入的卡槽。皿底灌装培养基后，盖上皿盖，将皿盖顺时针旋转，皿盖锁扣位置旋入皿底上口边缘的凸台，实现锁扣的功能。这种独特的结构设计保证了在实验过程中皿盖和皿底不会自动脱落，避免污染。


产品编号	描述	包装规格
752101	90×15 mm锁扣培养皿	20个/包, 25包/箱

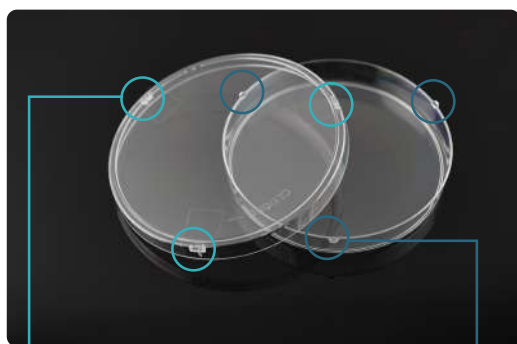

皿盖内有3处
凸起的锁扣

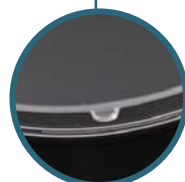

皿底的
3个凸台

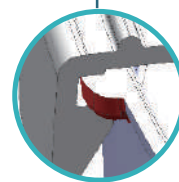

皿底和皿盖
锁扣的配合

