

<b>产品名称:</b>	NEST 自动化吸头
<b>产品应用:</b>	<p>用于基因组学、蛋白组学、细胞组学、免疫检测、代谢组学、生物制药的研发以及其他常用的高通量移液。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>NEST 自动吸头有两种类型：透明和黑色。</li> <li>Tecan 自动化吸头可用于 TECAN Freedom EVOlyzers 和全自动采样系统。</li> <li>Hamilton 自动化导电吸头可与 Hamilton 系列工作站配合使用。</li> <li>贝克曼机器人吸头可用于贝克曼 FX/NX, Biomek i5/ i7 和 Biomek 3000。</li> </ol>
<b>产品材质:</b>	医用级 PP
<b>产品保存:</b>	<p>室温保存</p> <p>有效期: 3 年 (保证包装完好)</p>
<b>灭菌:</b>	<p>是</p> <p>电子束灭菌, 无菌保障水平 SAL=10<sup>-6</sup>。辐照中心通过 ISO11137 体系认证。</p>
<b>热原与核酸酶:</b>	无内毒素, 无 DNase/RNase
<b>BSE/TSE 声明:</b>	产品生产过程未使用任何动物源成分或组织及转基因成分, 产品无 TSE/BSE 风险。
<b>检验:</b>	产品经过外观, 气密性测试, 电阻和 CV 值的测试, 包装检验, 项目均合格。
<b>特性:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>原材料选用进口医用级黑色导电聚丙烯 (PP), 严格按照行业要求选材, 保证材料批次间的稳定性</li> <li>产品分穴收集、包装, 每箱产品同一穴号, 确保产品的可追溯性与导电性能均一性, 提高实验结果的准确性</li> <li>独有的工艺技术, 确保吸头具有光滑的内表面, 大大减少液体残留量</li> <li>滤芯吸头多孔组织过滤, 以确保最佳性能, 且具有超强的疏水性, 对气溶胶形成了一道坚固的屏障, 消除样品交叉污染的风险</li> <li>按原厂适配器进行结构测绘, 拥有成熟的注塑工艺, 保证了产品具有良好的气密性和适配性, 提高了产品在工作中的机械精度</li> <li>品质管控严格, 十万级无尘车间自动化生产, 按照客户所需进行有效的质量检验, 无 DNase/RNase、蛋白酶以及致热源检测、无菌检测等</li> <li>气密性检测: 利用精密检测仪检查吸头与适配器之间的气密性, 保证了每批产品均具有良好的气密性</li> <li>电阻值及 CV 值检测: 每批进行一定数量的抽样检查, 利用精准独特的测量工具进行检测, 确保检测结果的准确与可靠性, 保证了产品具有均一的导电性</li> </ol> <p><b>自动吸头有两种类型</b></p> <p><b>NEST 自动化导电吸头:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEST 自动化黑色导电吸头由医疗级黑色导电聚丙烯 (PP) 材料制成</li> <li>电阻值和 CV 值的测试: 每批产品都要抽样检查, 使用精确和独特的测量工具, 确保测试结果的准确性和可靠性, 以保证产品的均匀导电性。</li> </ul> <p><b>NEST 自动化透明吸头</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NEST 自动透明针尖由高分子材料聚丙烯 (PP) 制成, 表面经过特殊工艺处理, 具有很高的疏水性。</li> </ul>

**总部**

地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

**Oversea**

NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)

- 自动透明吸头是为特殊目的而精心制作的，旨在为您的工作带来更高效的效率和可重复性。

**包装类型:**

**两种包装方式**

**泡壳装:**

1. 它具有良好的透明度和平滑度，以及良好的显示效果。
2. 具有良好的机械强度，泡壳材料外包装，壁厚大小适中，抗冲击，抗跌落，保证了产品在恶劣的运输条件下的完整性和安全性。
3. 对氧气和水蒸气具有良好的阻隔性能。
4. 良好的耐化学性，可承受各种化学材料的侵蚀。
5. 无毒，卫生性能可靠，可用于食品、药品和医疗器械的包装，并能耐受射线对其包装物品的消毒。
6. 对环境保护有良好的适应性，可回收利用，不产生对环境有害的物质。
7. 热成型性能好，与普通片材相比，是符合环保要求的一种理想包装材料。
8. 便于用户在大批量的自动化操作中获得高效率。

**盒装:**

1. 塑料盒是由高强度的 PP 材料制成，具有良好的强度，不易变形。
2. 产品尺寸符合行业 SBS 尺寸标准，适用于各种自动化移液工作站平台。
3. 塑料盒式吸头解决了特殊应用的无人接触需求，避免了手部接触，降低了污染风险，提高了工作效率。
4. 无 DNA/RNase，无内毒素。

## 产品列表

用于 Tecan 的自动化导电吸头，黑色			
图片	货号	产品描述	包装
	332002	用于 Tecan 的 50 μl 自动化吸头，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332012	用于 Tecan 的 50 μl 自动化吸头，带滤芯，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332102	用于 Tecan 的 200 μl 自动化吸头，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332112	用于 Tecan 的 200 μl 自动化吸头，带滤芯，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332202	用于 Tecan 的 1000 μl 自动化吸头，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332212	用于 Tecan 的 1000 μl 自动化吸头，带滤芯，导电，黑色，无菌，泡壳包装	96x2 联泡壳，12 联/箱
	332016	用于 Tecan 的 50 μl 自动化吸头，带滤芯，导电，黑色，无菌，盒装	96/盒，50 盒/箱

**总部**

地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

**Oversea**


NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)

	332116	用于 Tecan 的 200 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332216	用于 Tecan 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱

用于 Tecan 的自动化吸头, 透明

	332003	用于 Tecan 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332013	用于 Tecan 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332103	用于 Tecan 的 200 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332113	用于 Tecan 的 200 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332203	用于 Tecan 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332213	用于 Tecan 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 泡壳包装	96x2 联泡壳, 12 联/箱
	332007	用于 Tecan 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332017	用于 Tecan 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332107	用于 Tecan 的 200 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332117	用于 Tecan 的 200 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332207	用于 Tecan 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱
	332217	用于 Tecan 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 盒装	96/盒, 50 盒/箱

用于 Hamilton 的自动化导电吸头, 黑色

	345002	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345012	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345102	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱


总部

地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

Oversea

NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)

	345112	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345202	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345212	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345013	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345113	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345213	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345015	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 12 联/箱
	345005	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 12 联/箱
	345115	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 12 联/箱
	345105	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 12 联/箱
	345215	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 8 联/箱
	345205	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 导电, 黑色, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96x5 联泡壳, 8 联/箱

用于 Hamilton 的自动化吸头, 透明			
	345503	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345513	用于 Hamilton 的 50 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱

**总部**

地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

**Oversea**


NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)

	345603	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345613	用于 Hamilton 的 300 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345703	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱
	345713	用于 Hamilton 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 带条码, 无菌, 泡壳包装	96 支/盒, 24 盒/箱

用于 Beckman 的自动化吸头, 透明			
	317511	用于 Beckman 的 250 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 盒装	96 支/盒, 50 盒/箱
	317501	用于 Beckman 的 190 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 盒装	96 支/盒, 50 盒/箱
	317011	用于 Beckman 的 1070 $\mu$ l 自动化吸头, 透明, 无菌, 盒装	96 支/盒, 50 盒/箱
	317101	用于 Beckman 的 1000 $\mu$ l 自动化吸头, 带滤芯, 透明, 无菌, 盒装	96 支/盒, 50 盒/箱

设计图

T-款自动化吸头

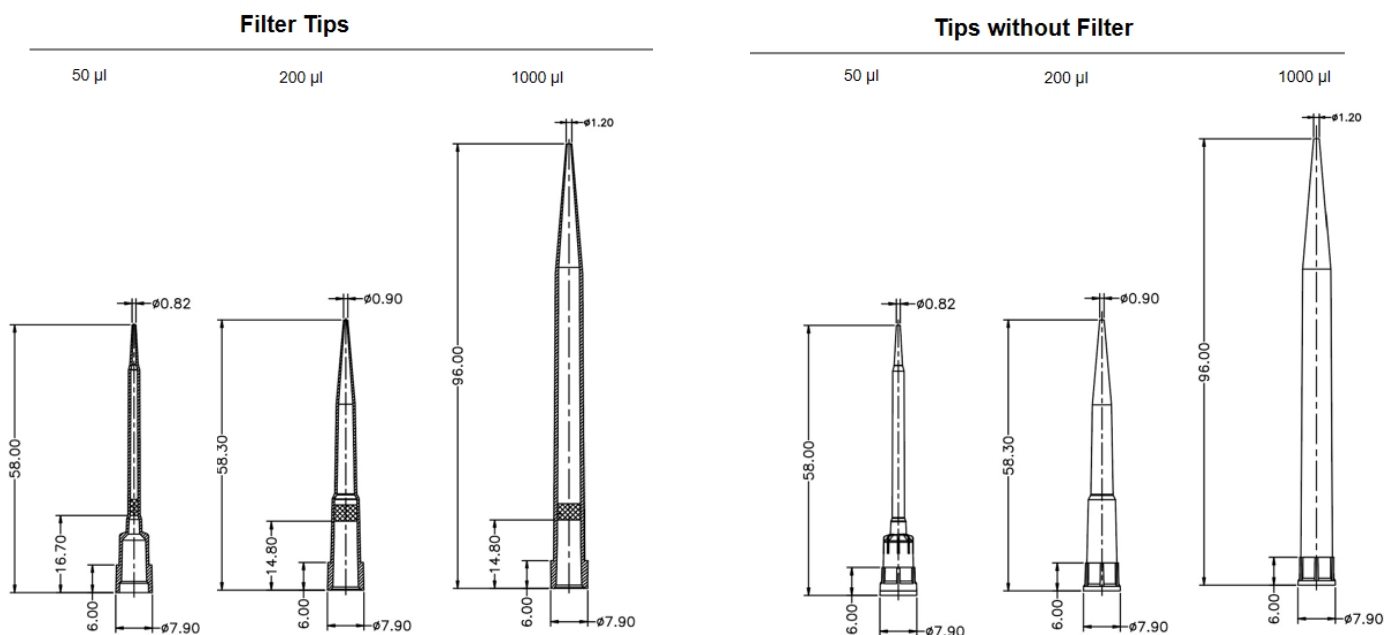

总部


地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

Oversea


NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)

## H-款自动化吸头


### Tips without Filter

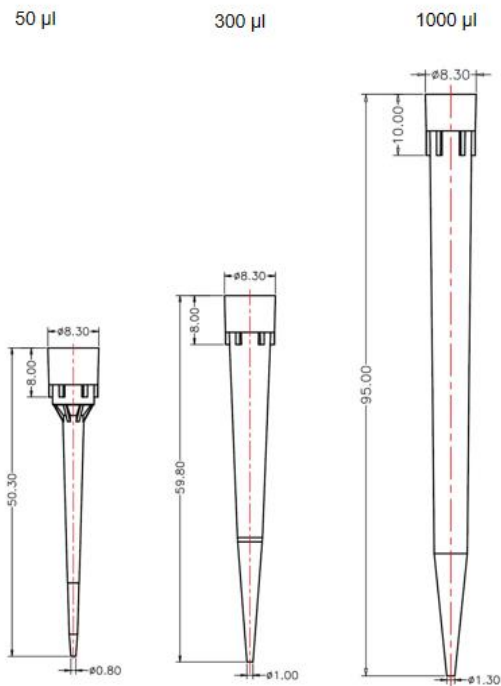

### Filter Tips

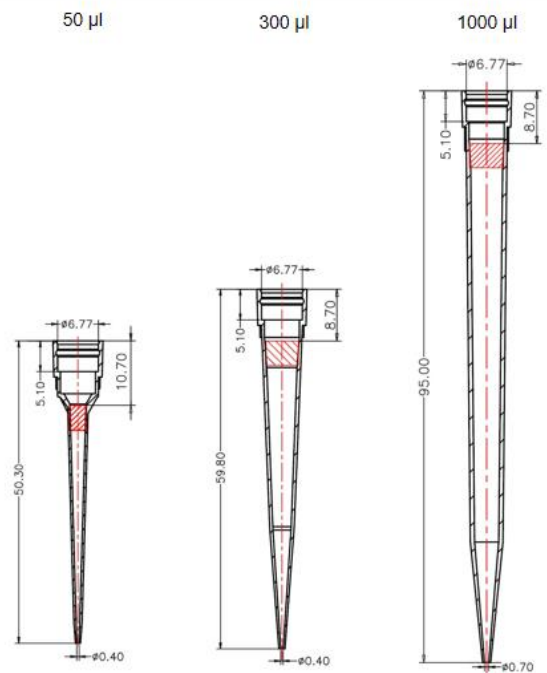

## B-款自动化吸头

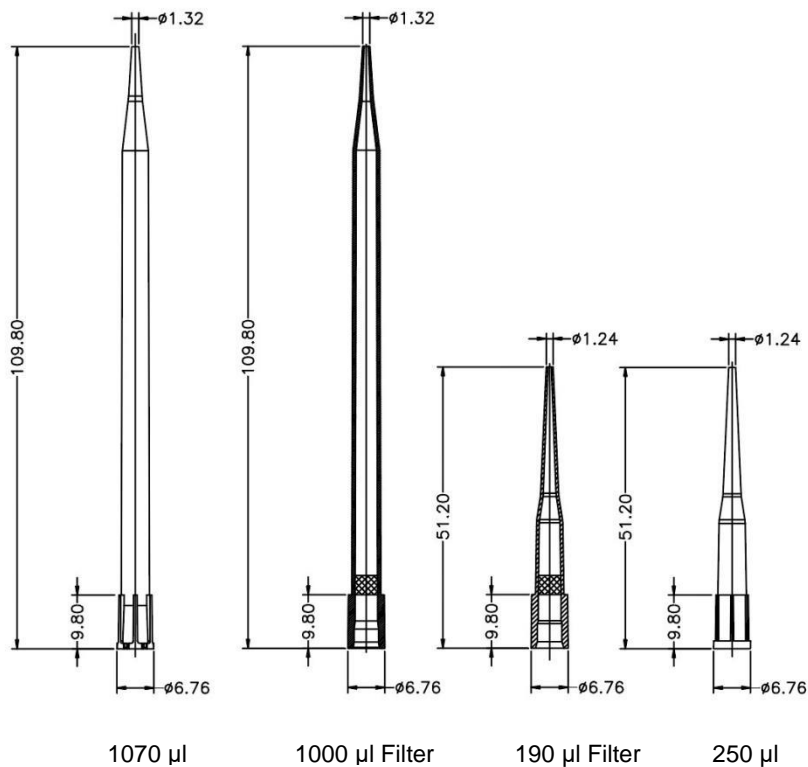

### 总部

地址: 无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号  
 电话: +86+ 510-6800 6788 邮箱: info@nest-wuxi.com  
 网址: www.cell-nest.com

### Oversea

NEST USA (New Jersey/ Phoenix)  
 NEST scientific 株式会社 (Yokohama, Japan)  
 NEST Scientific Europe B.V (Netherlands)  
 Nest Scientific (MENA) FZE (Sharjah, United Arab Emirates)