专注品质:为客户创造更多价值

易操作 可重复使用 笔式注射器

NEST Reusable Pen Injector



可重复使用笔式注射器是一种将药液和注射器合 二为一,能够反复使用的注射装置,药液以笔芯的 形式置于笔中,使用时不必每次抽取药液,只需拔 下笔帽,将旋钮调至事先设定的剂量后,即可进行 相关药液的注射。

除了用于常见的胰岛素注射外,NEST注射笔还可 用于生长素、抗生素、干扰素、美容药物、防生化急 救类、止血止痛类、心脏病急救类、解毒类、解热镇 痛类、麻醉镇静类等。









环保耐用






简单3步 轻松注射









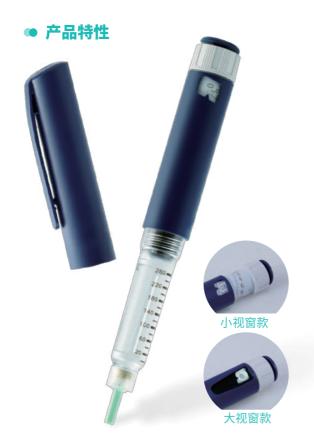





简单操作 无需专业指导,初次使用亦可轻松掌握







1、准备

2、剂量调节

3、注射

可定制化 高度可定制化:外观、颜色、剂量、刻度线可定制


剂量准确 80单位按压力<15N,60单位按压力<8N,剂量准确,提供专业的研发团队和数据验证资料支持

注射范围 现最小单位0.75单位(0.0075mL),注射范围60/74/80单位,可定制 可根据不同适应症针对性开发

注射药物 用于门冬胰岛素等需长期注射的药物等

证件齐全 成功办理二类医疗器械证,CEMDR、FDA(510k)已提交审核

● 产品包装

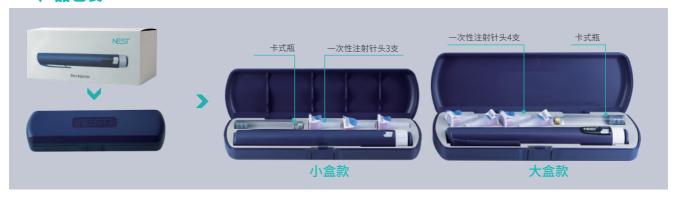

注:此图仅为示意图,实际产品不包含卡式瓶及针头

● 定制方案

| 产品名称 | 产品规格 | 最小单位剂量 | 常用剂量 | 常用刻 度单位 | 应用药物 |
|--------------|---------------|----------|-----------------|------------|---------------------------|
| 重复性 笔式注射器 | 60单位,适配3mL卡式瓶 | 0.01mL | 0-1-260偶数 | IU | 主要适用于门冬胰岛素系列。 |
| | 60单位,适配3mL卡式瓶 | 0.0075mL | 0-260偶数 | IU | 主要适用于生长激素。 |
| | 75单位,适配3mL卡式瓶 | 0.01mL | 0-1 0-1.7 0-2.4 | mg | 主要用于司美格鲁肽的药物。 |
| | 80单位,适配3mL卡式瓶 | 0.01mL | 0-280 | IU | 主要适用于德谷门冬胰岛素、甘精胰岛素、谷赖胰岛素。 |